

Engangs vaskefade med hygiejnepose



Produktbeskrivelse

- Vaskefadet fra Curas er fremstillet af PULP – en papirmasse baseret på genbrugspapir, helt uden tilsætning af kemikalier eller farvestoffer
- Vaskefadet kan pakkes i den tilhørende praktiske hygiejnepose
- Vaskefadet fås i 2 og 3 l som rund model og i 4 l som rektangulær model.

Unikke fordele

- Produktet er 100 % miljøvenligt og kan bortskaffes i almindelig affaldshåndtering
- Vaskefadet reducerer risikoen for kontaminering af patienter og plejepersonale
- Hygiejneposen er ideel til isolering af og bortskaffelse af forurenede affald efter brug

Kontakt:

Hanne Klitgaard
Produktchef
hk@gm-medical.com
Mobil: 3116 2010

Laura Vestergaard
Produktspecialist
lv@gm-medical.com
Mobil: 4258 9030

Engangs urinkolbe m/ SAP, låg og målepind



Produktbeskrivelse

- Engangs urinkolben er forsynet med SAP (Super Absorberende Pulver). Det er til engangsbrug med tilhørende engangslåg og målepind.
- Urinkolben er miljøvenlig og velegnet til bortskaffelse i almindelig affaldshåndtering. Kolbe og låg er lavet af genbrugspapir, sammensat af en vandbaseret forbindelse helt uden tilsætning af kemikalier eller farvestoffer, hvilket gør produktet 100 % bionedbrydeligt
- Målepinden er beregnet til engangsbrug og er lavet af pap.

Unikke fordele

- Urinkolben reducerer risikoen for kontaminering af patienter og plejepersonale
- Anvendelsen af SAP betyder, at urinen krystalliseres og omdannes til en geleignende masse
- Ved brug af engangslåg og SAP mindskes lugtgener og utilsigtet spild af urin undgås
- Engangsmålepinden er med til at give et nøjagtigt billede af mængden af urin i kolben

Kontakt:

Hanne Klitgaard
Produktchef
hk@gm-medical.com
Mobil: 3116 2010

Laura Vestergaard
Produktspecialist
lv@gm-medical.com
Mobil: 4258 9030

Miljøvenlige fiberbakker



Produktbeskrivelse

- Hvide fiberbakker lavet af restmateriale fra sukkerrør
- Miljøvenligt, biologisk nedbrydeligt og komposterbart
- Modstandsdygtigt over for vand op til 100° C, damp op til 136° C og olie op til 120° C

Unikke fordele

- Fiberbakkerne mindsker risikoen for kontaminering af patient og personale
- Bakkerne er ideelle som sterile procedurepakker, da de kan autoklaveres
- Bakkerne er UV-behandlet, hvilket forbedrer overfladehygiejnen
- Fås i tre størrelser:

	L x B x H (cm)	Vægt
Small	18 x 12,5 x 3,5	10 g
Medium	20,5 x 12,5 x 4,5	16 g
Large	27 x 19 x 4,5	30 g

Kontakt:


Hanne Klitgaard
 Produktchef
 hk@gm-medical.com
 Mobil: 3116 2010

Laura Vestergaard
 Produktspecialist
 lv@gm-medical.com
 Mobil: 4258 9030

Engangsbækken m/låg



08000 Bækken m/låg 2 l

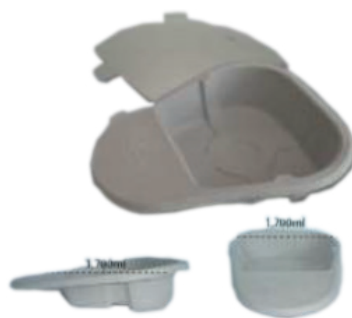

08001 Stikbækken m/låg 1,7 l



Produktbeskrivelse

- Produkterne er lavet af genbrugspapir helt uden tilsætning af kemikalier eller farvestoffer, hvilket gør det 100 % bionedbrydeligt. Låget er fremstillet af pap
- De to bækkener er miljøvenlige og egnet til bortskaffelse i almindelig affaldshåndtering
- 08000 fungerer til en bækkenstol
- 08001 fungerer som et stikbækken. For at stabilisere stikbækkenet bør man stable 2-3 stk. afhængig af patientens vægt

Unikke fordele

- Urinkolben reducerer risikoen for kontaminering af patienter og plejepersonale
- Vandtæt i mindst 4 timer
- Integreret mærkning til måleindikation
- Fungerer optimalt ved tilsætning til SAP-pulver

Kontakt:

Hanne Klitgaard
Produktchef
hk@gm-medical.com
Mobil: 3116 2010

Laura Vestergaard
Produktspecialist
lv@gm-medical.com
Mobil: 4258 9030

Tømme urinpose med SAP



Produktbeskrivelse

- C3 kateterposen er beregnet til at tømme brugerens kateter, dræn el.lign.
- Tømmeposen er lavet med indhold af SAP (Super Absorberende Pulver)
- Ved kontakt med væske omdannes SAP på kort tid til en gel bestående af separate partikler. Efter brug kan posen bortskaffes i almindelig affaldshåndtering
- Fås i 1,5 L og 2 L m/SAP

Unikke fordele

- Sikker og bekvem tømning af patientens kateterpose eller dræn
- SAP omdanner urin/sekreter til en gelelignende masse, det forhindrer utilsigtet spild
- Det er muligt at aflæse helt ned til 25 ml
- Tømmeposen har en Cross-Hanger funktion, der sikrer tæthed under tømning og forbedrer plejepersonalets arbejdsstilling

Kontakt:

Hanne Klitgaard
Produktchef
hk@gm-medical.com
Mobil: 3116 2010

Laura Vestergaard
Produktspecialist
lv@gm-medical.com
Mobil: 4258 9030

SAP (Super Absorberende Pulver)



08100 SAP i opløselige poser



08101 SAP i dispenserflaske



Produktbeskrivelse

- SAP (Super Absorberende Pulver) er et væske-absorberende stof (natriumpolyacrylat). Når væske tilføres pulveret, krystalliserer det og bliver til en gele lignende masse
- 08100 er SAP pakket i opløselige poser á 6 g. Opløses på 20-30 sek.
- 08101 er SAP pakket i dispenserflasker á 750 g, til at strø og hermed absorbere væske
- Bortskaffes i forbindelse med alm. affaldshåndtering eller i toilettet

Unikke fordele

- Absorberer 100 gange dets egen vægt
- Reducerer lugtgener
- Mindsker risikoen for infektioner
- SAP er med til at mindske spild og kontaminering via opkast, diarré, blod og lignende

Kontakt:

Hanne Klitgaard
Produktchef
hk@gm-medical.com
Mobil: 3116 2010

Laura Vestergaard
Produktspecialist
lv@gm-medical.com
Mobil: 4258 9030

Dispenserstativ til éngangskolber



Produktbeskrivelse

- Væghængt dispenserstativ i stål (11500)
- Designet til 08056 (WardPak-pakning) som indeholder 28 éngangskolber m/SAP, målepind og låg
- 08056-pakningen måler: H 55 cm x B 40 cm x D 28 cm

Kontakt:

Hanne Klitgaard
Produktchef
hk@gm-medical.com
Mobil: 3116 2010

Laura Vestergaard
Produktspecialist
lv@gm-medical.com
Mobil: 4258 9030