


Förlossningssängen

Nascentia

Förlossningssängen som är bekväm,
ergonomisk och lätt att använda

Bekväm och ergonomisk för mamman, lätt att använda av barnmorska,
läkare och vårdpersonal. Det kännetecknar förlossningssängen Nascentia.

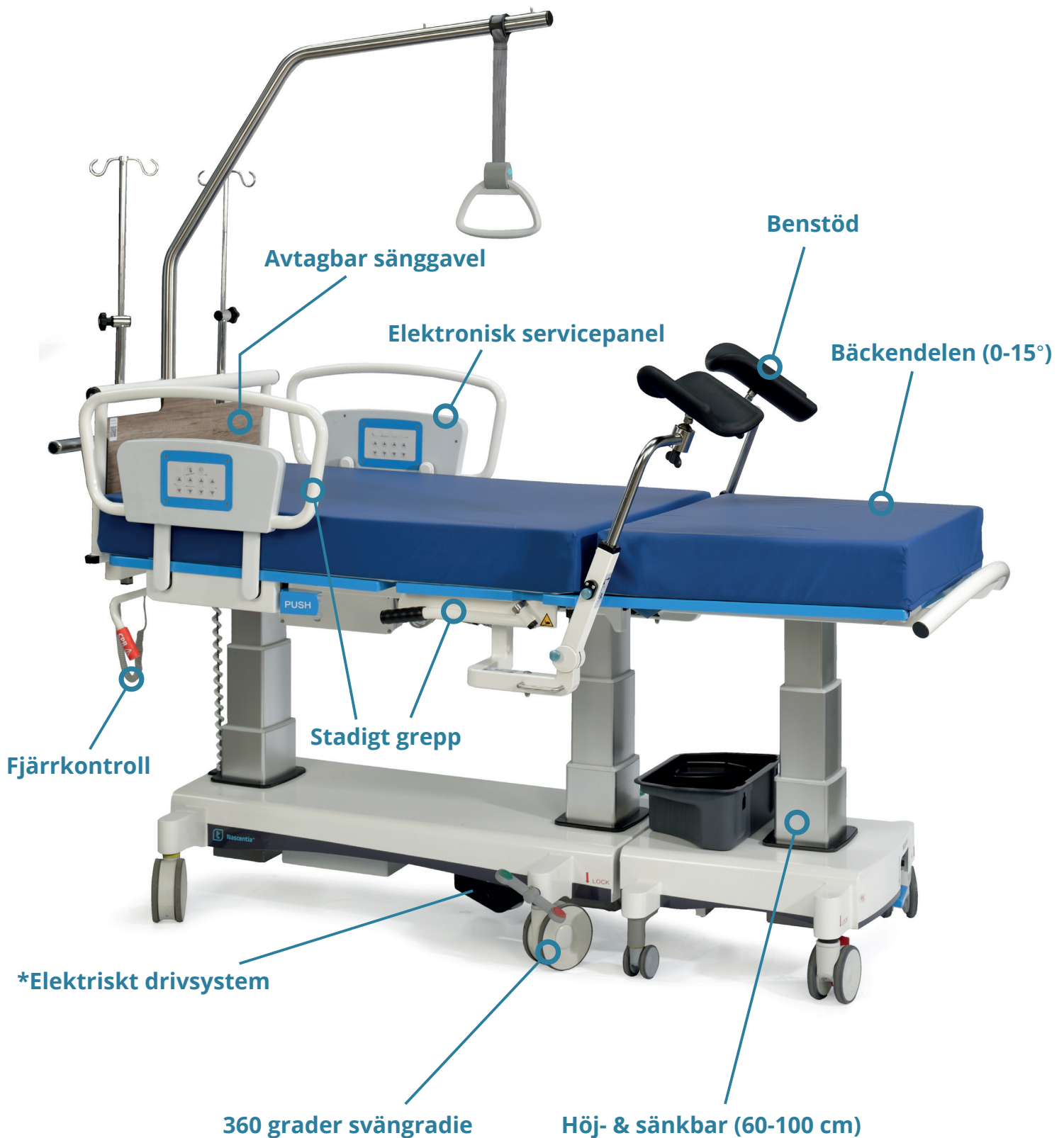

***Elektriskt drivsystem finns som tillbehör för att underlätta vid transporter.**

Förlossningssängen Nascentia

Nascentia förlossningssäng är en bekväm, fullt utrustad förlossningssäng, vilket gör sängen till det perfekta valet för förlossningsrummet. Den väntande, födande och återhämtande kvinnan kan använda sängen. Nascentia är användarvänlig, utrustad med alla väsentliga funktioner och designad för de olika positionerna.

Genom att ta bort ben- och fotdelen så kan sängen förvandlas till en förlossningssäng i en enkel rörelse. Denna sektion kan användas för olika arbeten, positioner eller som stol för barnmorskan eller förlossningsläkaren.



Ergonomi

Nascentia förlossningssäng är en ergonomisk säng med fokus på komfort och förebyggande av ryggskador för mamman och vårdpersonalen. Förlossningssängen kan enkelt manövreras av en person, även när den används av en patient, då sängen har en svängradie på 360 grader.

Funktioner

Nascentia förlossningssäng karakteriserad av dess användbarhet så du enkelt kan reglera höjden och justera fotstöden:



Naturlig komfort

- Polyuretan-skummadrassen är specialdesignad för förlossningssängen och erbjuder önskad komfort under och efter förlossningen. Madrassen har en densitet upp till 50 kg/m³.

Användarvänlighet på riktigt

- Tillbehör och funktioner är lätta att använda och hantera.
- Nascentia har ett inbyggt batteri och kan användas utan anslutning till elnätet.
- Sängen har en 360-graders svängradie tack vare den smarta hjulpositioneringen som möjliggör enkel manövrering och kontroll av endast en barnmorska.

Ren omgivning

- Inga separata beståndsdelar eller komponenter behöver installeras. Varje funktion och tillbehör har integrerats in i sängens design.
- Integrerade benstöd finns under sängen.

Justerbar

- Både sängen och bendelen kan justeras separat i höjdlid.

HLR-funktion

- Vid återupplivning möjliggör ett gas-fjäderstyrt HLR-handtag en snabb jämn horisontell position av ryggstödet.

Flera olika sektioner

- De olika sektionerna (nackstödet, bäckendelen och fotänden) kan alla justeras individuellt. Nascentia förlossningsbädd garanterar optimal positionering vid varje fas av förlossningen.

Avtagbar fotdel

- Fotänden av sängen kan kopplas loss och användas som stol för barnmorskan eller läkaren. Den kan styras manuellt vid separat användning eller automatiskt kopplad till resten av sängen.

Säkerhet

- De noggrant utformade grinden ger sängen hög stabilitet och stöd till patient och vårdpersonal.

Förlossningspositioner



1. Tronställning



2. Sidoläge



3. Lithotomy-ställning



4. Knäböjande förlossningsposition




5. Trendelenburg position



6. Sittställning



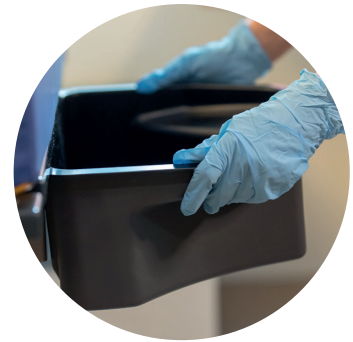

Hygien

Att förebygga infektioner är en viktig vårdfråga. Under designprocessen såg TechniCare till att skapa en design som är i enlighet med föreskrifter för smittskydd.

En av de mest framträdande egenskaperna hos förlossningssängen är att den är lätt att hålla ren. Skummadrassen har ett tvättbart polyesteröverdrag med PU-beläggning för luftning, men är ogenomtränglig för alla vätskor. Den är i överensstämmelse med de europeiska brandstandarderna EN1021-1/2 och EN 597-1/2.

Forskning och utveckling

Förlossningssängen är utvecklad i samarbete med flera sjukhus och framstående leverantörer.


”-Den perfekta sängen fanns inte ännu så vi bestämde att låta den designas åt oss. Vi behövde en förlossningssäng som förbättrade förutsättningarna för både mamman och vårdpersonalen.”

Tiba Spaapen, vårdenhetschef på OLVG-sjukhuset i Amsterdam.

Detta blev en central idé under designprocessen.

Läkande miljö

Förlossningssängen är designad enligt konceptet ”en läkande miljö”, vilket innebär att skapa en skräddarsydd miljö som förbättrar moderns välbefinnande. En lugnande miljö minskar stress hos gravida kvinnan samt familjen.

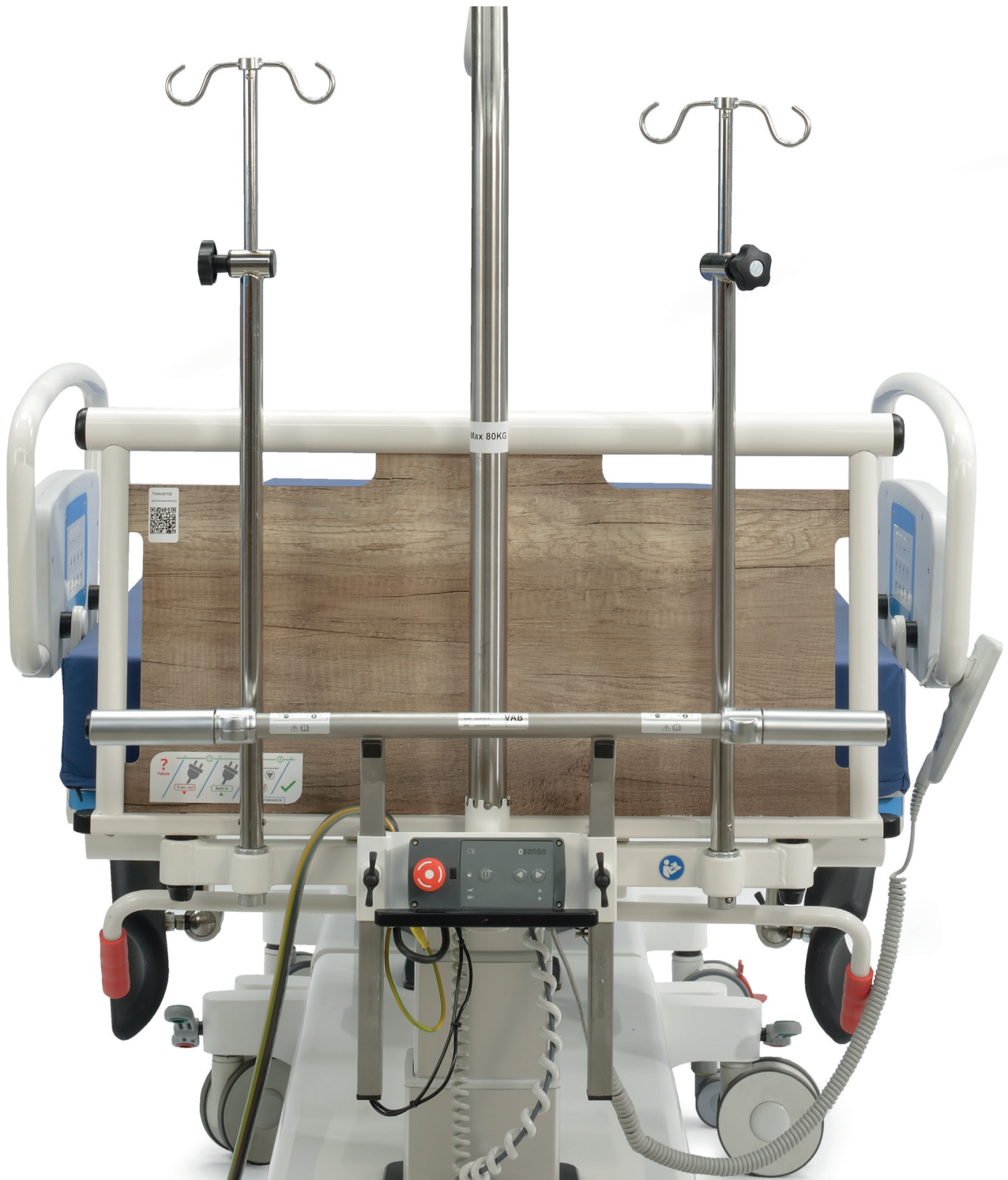


TechniCare levererar kundanpassade tillbehör.
Vänligen kontakta GM Medical för dina specifika önskemål.

Färgalternativ



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.

1. Grey White

7. Grey Aluminium

13. Sapphire Blue

2. Pure White

8. Signal Yellow

14. Night Blue

3. Light Grey

9. Light Ivory

15. Pure Orange

4. Antraciet Grey

10. Antique Pink

16. Turquoise Blue

5. Jet Black

11. Ruby Red

6. White Aluminium

12. Yellow Green

Tillbehör

- Unikt: dävert justerbart handtag
- Under sängen belysning
- Handgrepp
- En extra IV-stång
- Fjärrkontroll
- V-cut madrass



Tekniska specifikationer

Total längd:	235 cm
Total bredd:	103 cm
Madrassens längd:	210 cm
Madrassens bredd:	90 cm
Madrassens tjocklek:	14 cm
Höjjustering:	60-100 cm
Justering av ryggstöd:	max. 80°
Bäcken sektion:	0-15°
Lyftkapacitet - säng:	250 kg
Lyftkapacitet - stol:	200 kg (vid fristående)
Trendelenburg:	upp till 15°
Hjul:	15 cm



För ytterligare information
kontakta product specialist

Maria Wallén

Mobil: +46 73 588 63 01

Email: mw@gm-medical.com